

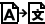
**PAJUNK®**

**IntraLong Cath  
EpiLong Cath  
EpiLong Soft Cath**


**Regional Anesthesia**




## Brugsanvisning

 Denne brugsanvisning er blevet oversat til følgende sprog: DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Oversættelserne kan downloades fra vores websted [eifu.pajunk.com](http://eifu.pajunk.com).

### Obs!

 Læs følgende informationer og betjeningsvejledning omhyggeligt.


 Produktet må kun anvendes af kvalificeret medicinsk fagpersonale i henhold til denne brugsanvisning.


PAJUNK® anbefaler ikke nogen bestemt behandlingsmetode. Det medicinske fagpersonale har ansvaret for den måde, produktet bruges på, og for udvælgelsen af patienter.

Ud over denne brugsanvisning gælder relevant information i tilhørende speciallitteratur tillige med det aktuelle tekniske stade og den aktuelle viden.


Manglende overholdelse af brugsanvisningen gør garantien ugyldig og bringer patientens sikkerhed i fare.

Hvis produktet bruges sammen med andre produkter, er det vigtigt at tage højde for disse produkters kompatibilitetsoplysninger og brugsanvisninger. Det er brugerens ansvar, hvis det besluttes at kombinere produkter fra forskellige producenter (hvor de ikke udgør behandlingsenheder).

 Produktet må under ingen omstændigheder anvendes, hvis der er grund til mistanke om, at det er ufuldstændigt, beskadiget eller ikke er sterilt.

 Kun produkter, der er i perfekt stand, i ubrudt emballage, hvor den sterile udløbsdato på etiketten ikke er overskredet, må anvendes.

### Beskrivelse af udstyret/ kompatibilitet

 Produktnumrene og omfanget af denne brugsanvisning fremgår af den aktuelle overensstemmelseserklæring.

Kateter: Valgfrit med indvendig spiral, stilet; Spidsgeometri: centrale distale eller laterale åbninger


Umiddelbart tilbehør: kateteranlægningshjælp, Clamping adapter

Kompatibel med: egnet kanyle i passende størrelse til kateterplacering, filter, FixoLong og FixoCath.

Navtilslutning: LUER

### Tilsluttet anvendelse

Katetrene er designet til at forblive i målområdet (epiduralrummet / spinalrummet) og til kontinuerligt at administrere en lokal anæstesi, der leveres fra en ekstern kilde.

 Anvend ikke kateteret med den indvendige spiral eller stimulationselektrode samt kanylen til MR-procedurer! Anbring efter placeringen altid den medfølgende mærkat "Ikke egnet til MR" på kateteret, eller markér den iht. forskrifterne for din institution til tredjepart, så den er forståelig og entydig.

## Tilsigtet anvendelsesgruppe

Medicinsk fagpersonale, anæstesiologer

## Patientmålgruppe


Ingen begrænsninger i patientmålgruppen (etnicitet, alder, ect.)

## Indikationer

Kontinuerlig epidural-/ spinalanæstesi og analgesi.

## Kontraindikationer

### Produktspecifikke kontraindikationer

 Produktet må under ingen omstændigheder anvendes ved kendt overfølsomhed over for materialet og/eller kendte vekselvirkninger!

### Kliniske kontraindikationer

#### *Absolutte kontraindikationer:*

- Patientafvisning
- Dårligt kontrolleret hæmoragisk diatese eller antikoagulation (koagulationslidelser)
- Systemisk infektion (sepsis/bakteræmi)
- Lokal infektion på injektionsstedet
- Lokal malignitet på injektionsstedet
- Svækket immunsystem
- Stærk, dekompenaseret hypovolæmi, shock
- Ukontrolleret diabetes mellitus

#### *Relative kontraindikationer:*

- Specifikke neurologiske lidelser
- Specifikke hjertekarlidelser
- Allergisk reaktion/overfølsomhed over for de administrerede midler (kontrast, bedøvelsesmiddel, kortikosteroid)
- Svære spinaldeformiteter, arthritis, osteoporose, discusherniering eller lidelse efter discusoperation.
- Lidelse efter spinalfusion, spinal metastase
- Nylig indtagelse af ikke-steroid antiinflammatorisk medicin
- Uerfaren bruger

## Komplikationer

### Udstyrsspecifikke komplikationer:

Kateterbrud, forskydning af kateteret, knæk i kateteret, knude på kateteret, reduceret/manglende gennemstrømning (tilstoppelse), udgldning af kateteret.

### Metodespecifikke komplikationer

#### *Ved anlæggelse:*

Kateterspidsen kan ikke placeres i subarachnoidalrummet, kateterspidsen kan ikke placeres i epiduralrummet (resulterer i knuder eller forskydning af kateteret på den anlagte kanylespids), utilsigtet intravaskulær placering af kateteret, utilsigtet placering af kateteret i subarachnoidalrummet, vanskeligheder med at anlægge kateteret (kan føre til at kateteret bøjer).

#### *Ved anvendelsen:*


- Tekniske problemer, der fører til for tidlig afbrydelse af epidural analgesi, kan opstå på grund af et kateter, der glider ud eller tilstopper, lækage ved udgangsstedet for kateteret.
- For tidlig afbrydelse af epidural analgesi på grund af kateter-associerede infektioner
- Katetermigration


#### *Ved fjernelse:*

Modstand ved fjernelse af kateteret, hvilket fører til et brud på kateteret.


### Kliniske komplikationer


- Lokale og systemiske infektioner
- Neuronal skade (under placering af kanylen/kateteret, hvilket kan føre til midlertidig intensivning af smerte, midlertidig motorisk svaghed, forbigående smerter i ryggen eller ekstremiteterne, følelsesløshed og/eller prikken, paraplegi)
- Utilsigtede vaskulære punkturer med tilsvarende komplikationer (vaskulære læsioner, blødning/hæmatomer, vasovagale reaktioner, intravaskulær injektion osv.)
- Intraarteriel injektion (direkte injektion i rygmærven, a. vertebralis eller a. radicularis omfatter rygmærvsinfarkt, epidural hæmatom og hjernestammeblødning, neurologiske hændelser, vaskulære komplikationer, trombose eller tromboembolisme)
- Utilsigtet punktur af dura med tilhørende komplikationer
  - Durapunktur og væsketab: postspinal hovedpine eller rygsmerter, kvalme, opkast, neurologisk skade, epidural hæmatom, epidural absces
  - *Anæstetikum i subarachnoidalrummet*: kredsløbsproblemer, fald i legemstemperatur, urinretention, respiratoriske bivirkninger og komplikationer, svækkelse i ekstremiteter, total spinal anæstesi, cauda-equina-syndrom.
- Det lokale anæstetikums toksicitet

 Brugerne skal informere patienter om typiske komplikationer ved proceduren.

 Hvis der opstår komplikationer under anvendelse af produktet, skal hospitalets/klinikkens protokoller følges. Hvis dette ikke løser komplikationerne, eller hvis de anses som alvorlige eller umulige at behandle, skal proceduren standses med forsigtighed, og produktets invasive udstyrskomponenter skal fjernes fra patienten.


## Advarsler


 Anvendelsestid for det kontinuerlige system: 7 dage (168 timer)

 PAJUNK® kanylen eller kateteret kan også anlægges under vejledning af ultralyd eller røntgen.

 for sterilt produkt:


Der er tale om et medicinsk engangsprodukt til brug på én patient!

 Produktet må under ingen omstændigheder genbruges!

 Produktet må under ingen omstændigheder resteriliseres!

De materialer, der er anvendt til fremstilling af udstyret, egner sig ikke til genbehandling eller resterilisering!

Produktet er ikke beregnet til genbehandling eller resterilisering.


 Uautoriseret genbrug eller genbehandling

- kan få udstyret til at miste vigtige egenskaber, som producenten havde tiltænkt.
- giver en signifikant risiko for krydsinfektion/-kontamination som følge af potentielt utilstrækkelige behandlingsmetoder.
- udgør en risiko for, at produktet mister funktionskendetegn.
- kan få materialer til at gå i stykker og forårsage endotoksiske reaktioner på grund af rester!


 til kateterplacering og fjernelse:

1. Kontrollér kateterets gennemgang gennem kanylen umiddelbart før brugen.
2. Mens kanylen anlægges, kan kanylespidsen blive beskadiget af knoglekontakt. Hvis et kateter derefter passerer gennem en kanyle, der er beskadiget på denne måde, kan dette dermed selv beskadiges. Brug i sådan et tilfælde en ny kanyle.
3. Hvis kateteret allerede har forladt kanylespidsen, skal du ikke trække kateteret tilbage, da der er risiko for forskydning.
4. Fjern kateteret, og gentag punktionsforsøget, hvis der kan ses blod (eller i tilfælde af epidurale anvendelser, CSF-væske) i kateterets returvindue eller i sprøjtenes kolberum. Kateteret er i dette tilfælde placeret forkert.
5. I tilfælde af seponering skal kateteret og kanylen fjernes som én enhed, hvis det er muligt.

6. Hvis gennemstrømningen kompromitteres, skal du kontrollere Clamping adapterens lås.
7. Ved brug af katetre med lukket spids og laterale åbninger, skal du skubbe kateteret mindst 15 mm (maks. 50 mm) ud over kanylens spids, så uhindret injektion er mulig.
8. Før aldrig kateteret længere ind end 50 mm. Når kateteret skubbes længere fremad end 50 mm, øges sandsynligheden for, at kateteret får knuder.
9. Pas på, at kateteret ikke knækker under fiksering.
10. Kontrollér regelmæssigt forbindelsen mellem kateteret og infusionsanordningen.
11. Undlad at rykke eller hurtigt trække i kateteret, når du fjerner det fra patienten.
12. Undgå at bruge unødvendig kraft, når du fjerner kateteret. Træk ikke kateteret længere ud, hvis det begynder at strække overdrevent.
13. Træk under ingen omstændigheder kateteret længere ud, hvis du føler modstand, når du fjerner det. Flyt om nødvendigt patienten til en anden position for at øge afstanden mellem ryghvirvlerne. Prøv herefter igen at trække kateteret ud. Hvis dette fortsætter med at forårsage vanskeligheder, skal du udføre en fluoroskopi eller røntgen før yderligere procedurer.
14. Kontrollér, at kateterets distale spids er hel efter udtrækningen. Spidsen skal være intakt. Kun i dette tilfælde kan du være sikker på, at hele kateteret er fjernet.

 *ved brug sammen med andre kompatible produkter:*

1. Ved brug af flere komponenter skal du sætte dig ind i deres betjening før brug ved at kontrollere tilslutninger og passager (kanyler, adaptere).
2. Når du tilslutter kateteret til Clamping adapteren, skal du sørge for at anlægge kateteret helt i adapteren, indtil det stopper (hvilket vil sige mindst til orienteringsmærket). Skyl aldrig før tilslutning!
3. Alkoholbaserede eller alkoholholdige desinfektionsmidler kan beskadige filtret.
4. Skru låsekappen på, inden filteret desinficeres.

 *yderligere advarselsindikationer:*

1. Du skal rutinemæssigt træffe generelle forholdsregler for håndtering af blod og kropsvæsker i forbindelse med brug og bortskaffelse af udstyret på grund af risikoen for kontakt med blodbårne patogener.
2. Bemærk, at fortsat brug af udstyr af samme type skal vurderes kumulativt som beskrevet i lovgivningen om medicinsk udstyr, også efter at udstyret er blevet udskiftet eller erstattet.
3. Lægemidler, der ikke er indiceret til den påtænkte anvendelse, må ikke indgives.
4. Undgå dannelse af en flydende film mellem kateteret og Clamping adapteren (f.eks. på grund af væsker på handskerne). Væsker i den proximale ende af kateteret kan forstyrre holdeevnen og forårsage afbrydelser og/eller lækager.

## Anvendelse

For at placere kateteret skal patienten være i en siddende eller liggende stilling med ryggen bøjet for at maksimere åbningen af det vertebrale mellemrum.

Punkturstedet bestemmes og markeres. Efter desinfektion af huden og den sterile dækning af punkturstedet, foretages der lokalanæstesi af huden og det subkutante væv ved injektion af et lokalt anæstetikum.

En perforering på punkturstedet udføres med en blodlancet eller injektionskanyle med stor lumen.

### *Positionering af et kateter i epiduralrummet*

1. En epiduralkanyle indsættes i det interspinale ledband. Stiletten fjernes, og en NaCr- eller en luftfyldt LOR-sprøjte fastgøres til kanylen.
2. Kanylen føres forsigtigt ind i epiduralrummet. Når epiduralrummet er nået, vises det med det karakteristiske modstandstab. Indholdet i LOR-sprøjten kan let tømmes. (Loss of resistance-teknik)

Alternativt kan kanylen anlægges uden en LOR-sprøjte fastgjort til kanylenavet. I dette tilfælde indikeres det, at epiduralrummet er nået, med en dråbe, som hænger på kanylenavet, så længe det interspinale ledband passerer, og som trækkes tilbage i kanylenavet, når epiduralrummet er nået.

3. Omhyggelig aspiration er påkrævet for at udelukke intravaskulær kanylepositionering.
4. Den distale ende af kateteret indsættes i kanylen. Kateteret føres med kanylen til den ønskede dybde. Kateteret bør ikke føres mere end 5 cm over kanylespiden.
5. Derefter trækkes kanylen forsigtigt tilbage via kateteret.
6. Kateteret fastgøres i denne position under sterile forhold med en FixoLong.
7. Kateteret tilsluttes nu til en Clamping adapter. Den proksimale ende af kateteret indsættes derfor i den centrale åbning af adapteren og indsættes derefter til mærket for indsættelsesdybden og fastgøres i denne position.
8. På Clamping adapterens Luer-lock-tilslutning anbringes der et bakteriefilter, og en testdosis af det lokale anæstetikum indgives gennem kateteret.

### *Placering af spinalkateteret*

1. Positionér spinalkanylen i subarachnoidalrummet.
2. Placér kateterbeholderen på kanylenavet.
3. Skub kateteret med den markerede ende ind i målområdet til den ønskede dybde.
4. Tag kateteret fra kateterbeholderen, og træk beholderen tilbage, indtil stiletten er helt trukket ud af kateteret.
5. Den rigtige kateterposition skal kontrolleres via cerebros spinalvæskens returløb.
6. Efter vellykket positionering, fjernes kanylen via kateteret. Hold om nødvendigt kateteret med din anden hånd.
7. Efter at have fjernet kanylen skal du tilslutte kateteret til Clamping adapteren.

8. Fyld filteret med den anæstetiske opløsning, der skal bruges i starten af anæstesen/analgesien for at kompensere for det døde rumvolumen (filterets påfyldningsvolumen er ca. 0,35 ml).
9. Forbind kateteret med navet på filteret.
10. Fyld en sprøjte med det valgte anæstetikum eller analgetikum, og forbind denne med filternavet. Katetersystemet er nu klar til injektionen.
11. Fastgør kateteret på udgangsstedet med FixoCath (ekstraudstyr).

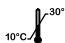
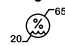


#### Fastgørelse af FixoLong (ekstraudstyr)

1. Fastgør PAJUNK®-FixoLong med et fikseret kateterkors nær kateterudgangen.
2. Fiksér kateteret med fastgørelsesclipsene. Dette garanterer maksimal bevægelsesfrihed med samtidig fiksering af kateteret.
3. Sæt filterbæreren på kateterkorset.
4. Fastgør bakteriefilteret på filterbæreren.

#### Fastgørelse af FixoCatch (ekstraudstyr)


1. Hold kateteret ved kateterudgangens position over den snittede side af FixoCath-fikseringsplasteret
2. Fjern de tre beskyttelsesfolier på klæbestrimlerne på den nederste del af fikseringsplasteret, og sæt plasteret på huden.
3. Fjern nu folien på de langsgående klæbestrimler på skumunderlaget, og placér kateteret herover.
4. Fjern klæbebåndet fra det perforerede afdækningsplaster, og fastgør det over kateteret.


### Anvendelse og opbevaring


	Temperaturbegrænsning	+10 °C til +30 °C
	Luftfugtighedsbegrænsning	20 % til 65 %
	Beskyttes mod sollys	
	Opbevares tørt	

### Generelle anvisninger

Produkterne fremstilles i overensstemmelse med de globalt gældende direktiver om farlige stoffer.

 Pyrogenfri

 *Alle alvorlige hændelser, der opstår under brug af produktet, skal rapporteres til producenten og de relevante myndigheder i det land, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende.*

 PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, Tyskland.



## Forklaring til symboler, der anvendes på etiketterne



Producent



Udløbsdato



Katalognummer



Steriliseret med ethylenoxid



Må ikke steriliseres på ny



Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget



Opbevares tørt



Luftfugtighedsbegrænsning



Må ikke genbruges



Forsigtig



Fremstillingsdato



Batchkode



Beskyttes mod sollys



Temperaturbegrænsning



Overhold brugsanvisningen



Pyrogenfri



Advarsel: Salg eller udskrivelse af dette produkt på recept af en læge er underlagt begrænsningerne i den tyske lovgivning



Ikke MR-sikker



Tip



Informationer



"CE-overensstemmelsesmærkning" eller "CE-mærkning" = mærkning angiver, at et produkt opfylder de relevante krav i forordningen om medicinsk udstyr eller anden EU-lovgivning om anbringelse af den pågældende mærkning.



Indeholder ingen phtalater



Der er ikke brugt naturgummi i fremstillingen af dette produkt



Styktal



Oversættelse



Medicinsk udstyr



Unik identifikator for et medicinsk udstyr



Enkelt sterilbarrieresystem



XS190246D\_Dänisch 2022-02-10



**PAJUNK® GmbH**  
Medizintechnologie  
Karl-Hall-Strasse 1  
78187 Geisingen/ Germany  
Phone +49 (0) 7704 9291-0  
Fax +49 (0) 7704 9291-600  
[www.pajunk.com](http://www.pajunk.com)